


Système de diagnostic CardioSoft Tension artérielle ambulatoire

Évaluation de la tension artérielle de qualité

- L'application CardioSoft™ Diagnostic System v6.6 Ambulatory Blood Pressure (ABP) constitue une solution logicielle de monitoring de la tension artérielle sur des périodes prolongées
- Facile à programmer et simple à configurer, le module TONOPORT™ V fournit des données de tension artérielle complètes sous forme de texte ou de graphiques, avec paramètres configurables par l'utilisateur.
- Vous pouvez programmer le module TONOPORT V de manière à ce qu'il mesure la tension artérielle à des intervalles précis ou aléatoires.
- Son design compact et léger, sa pompe intégrée peu bruyante et le réglage de la pression de gonflage en font un appareil que vos patients utilisent en tout confort.
- Le module TONOPORT se connecte simplement à votre PC pour télécharger rapidement les données enregistrées.
- La flexibilité des fonctions de rapport vous permet de visualiser les rapports dans de nombreux formats, comme Excel et XML, et d'effectuer une analyse détaillée de l'état du patient
- Les rapports peuvent être exportés vers le système de gestion des données CardioSoft Diagnostic System, les systèmes de dossiers médicaux informatisés et les systèmes PACS

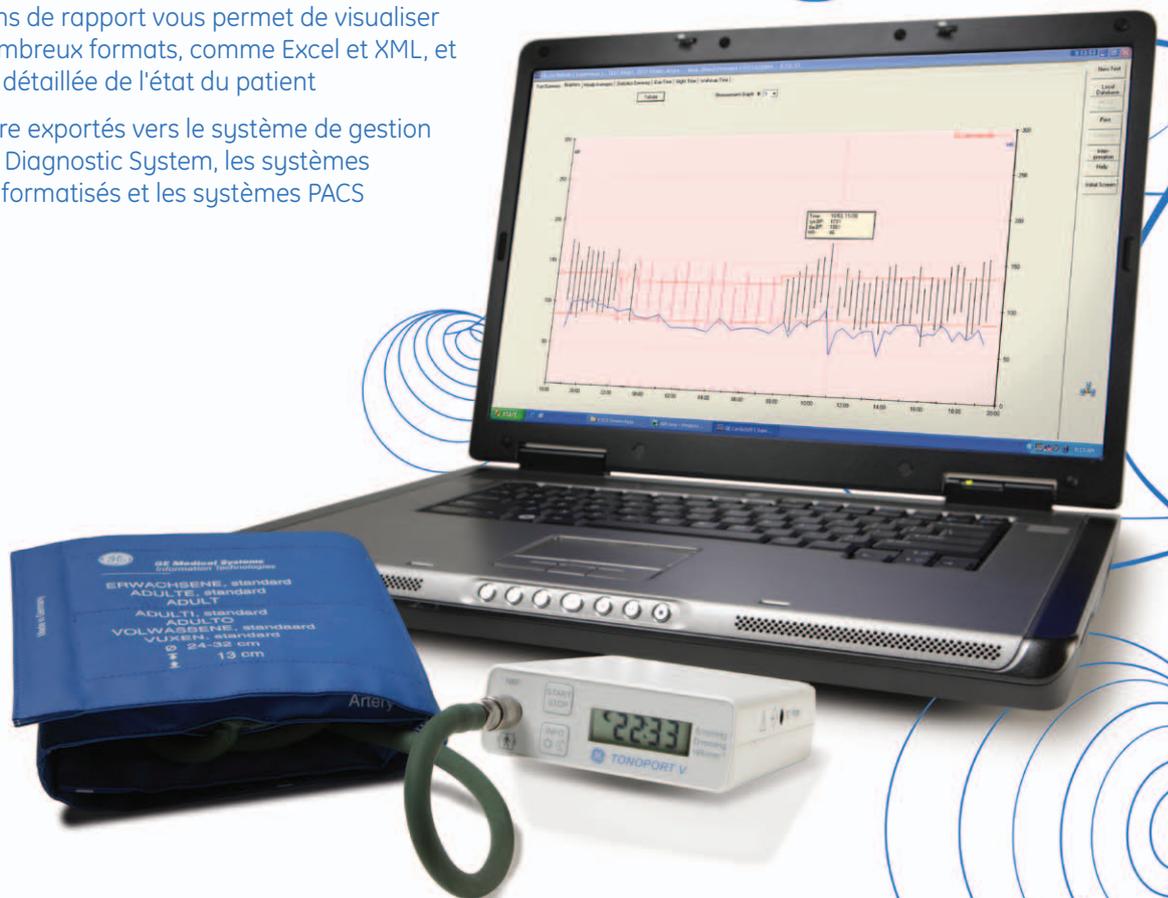

Caractéristiques	
Caractéristiques techniques	
Mémoire	EEPROM 128 x 8 bits (= 1 mégabit) EEPROM 512 x 8 bits (= 4 mégabits)
Plage de mesure	Pression systolique : 60–260 mmHg (8,0–34,6 kPa) Pression diastolique : 40–220 mmHg (5,3–29,3 kPa) Pression moyenne : 50–260 mmHg (6,7–33,3 kPa) Fréquence cardiaque : 35–240 battements par minute
Période d'acquisition	Jusqu'à 30 heures ou 200 mesures
Batterie	2 piles AA NiMH rechargeables, 1,2 V ≥ 1500 mAh En option : 2 piles AA alcalines
Chargeur de batterie	Chargeur universel : Large plage de tension d'entrée 100...240 Vca, 50...60 Hz; Temps de charge : 2 à 3 heures
Caractéristiques environnementales	
Fonctionnement	Température : (10 à 40° C) Humidité relative : 30-75%, sans condensation Pression atmosphérique : 700-1060 hPa
Niveau de bruit du gonflage	40 dB
Transport et stockage	Température : (-20 à 70 °C) Humidité relative : 10-90%, sans condensation Pression atmosphérique : 500-1060 hPa
Dimensions et poids	Hauteur : 100 mm Largeur : 80 mm Profondeur : 27 mm Poids : 199 g avec piles rechargeables
Certifications relatives aux dispositifs médicaux	CE-0482 Conforme à la directive ROHS

Configuration minimale - Stations de travail CardioSoft Diagnostic System	
Microprocesseur	Configuration minimale : Pentium 4 ≥ 1,6 GHz (Windows® XP) ; 2 GHz (Windows Vista)
Mémoire vive	512 Mo (Windows XP) ; 1 Go (Windows Vista)
Disque dur	4 Go (en fonction du nombre de tests à sauvegarder) ; 50 Mo de mémoire disponible
Installation logicielle	Lecteur CD-ROM
Pointeur	Souris
Carte graphique	Configuration minimale : SVGA 1024 x 768 Configuration recommandée : SXGA 1280 x 1024
Interfaces	Configuration minimale : 2 ports USB, lecteur CD-RW, carte SD, carte d'interface réseau (recommandée)
Système d'exploitation	Windows XP/Pro SP 2/3 ; Windows Vista Home Premium/ Business SP 1; Windows Server 2000/2003
Imprimante	compatible lecteur PLC 6 ; papier format lettre américain ou format A4 ; USB ou interface parallèle ; GE Healthcare recommande l'utilisation des imprimantes réseau HP4250, HP4650 ou HP LaserJet® P3005 dn pour CardioSoft Diagnostic et pour l'impression en réseau à partir des systèmes CASE
Applications logicielles supplémentaires pour les fonctions d'exportation	Microsoft® Word et Excel® (en option)
Mise en réseau LAN	Sans fil : 802,11G (en option) Interface TCP/IP
Citrix®	GE Healthcare n'assure pas la vente, l'installation et la maintenance de l'application logicielle Citrix

Veuillez noter que certains produits GE peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions en raison de contraintes linguistiques ou d'autorisation. Veuillez contacter le représentant GE local pour obtenir les informations les plus récentes sur la disponibilité des produits dans votre région.

GE Healthcare
Munzinger Straße 5
79111 Freiburg, Allemagne
Tél. +49 761 4543 0 • Fax +49 761 4543 233

France
1211 chemin de la Bruyère
Zac de Sans Souci
69578 LIMONEST cedex
T : + 33 (0)4 78 66 62 10
F : + 33 (0)4 78 43 26 58

www.gehealthcare.com



GE imagination at work

©2010 General Electric Company – Tous droits réservés.

General Electric Company se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications et fonctions mentionnées dans le présent document, ou de suspendre la commercialisation du produit décrit à tout moment, sans préavis ni obligation de sa part.

GE, le logo GE, CardioSoft et TONOPORT sont des marques commerciales de General Electric Company.

GE Healthcare, une division de General Electric Company.

Citrix est une marque commerciale de Citrix Systems, Inc.

HP LaserJet est une marque commerciale de Hewlett-Packard Company.

Microsoft, Excel et Windows sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Pentium est une marque commerciale de Intel Corporation.

EMEA 2003303-003/V6/0110
(EMEA English 2003303-002/V6)